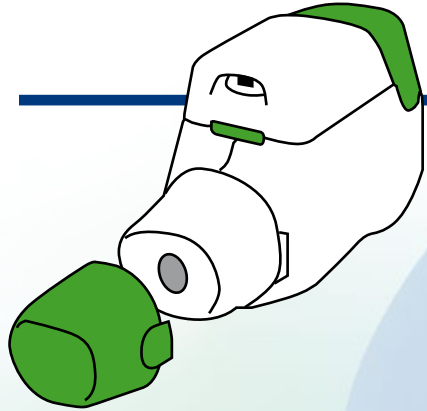






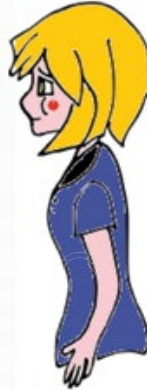

Genuair



Erabilera -jarraibideak

- Inhalagailua hartu aurretik, biriketako aire guztia kanpora ezazu. Ez bota arnasa ahokoaren barruan.
- Gailuaren ahokoa ahoan duzula, hartu arnasa, gelditu gabe, toraxa erabat bete arte. Kendu ezazu inhalagailua ahotik eta arnasketari 10 segundoz eutsi iezaziozu.
- Dosiaren adierazlea (alboko leiho txikia) hamarnaka jaisten doa inhalagailuaren hartualdi bakoitzean, 60tik 0raino. 10 dosi geratzen direnean, marra gorriak agertuko dira.
- Ahoa urarekin garbitu ezazu, medikamentuaren hondarrak kentzeko.
- Paperezko musuzapi bat edo zapi lehor bat erabil ezazu ahokoa garbitzeko.
- Ez garbitu ahokoa urarekin edo zapi hezeekin.
- Gorde inhalagailua, itxita, leku lehor batean.

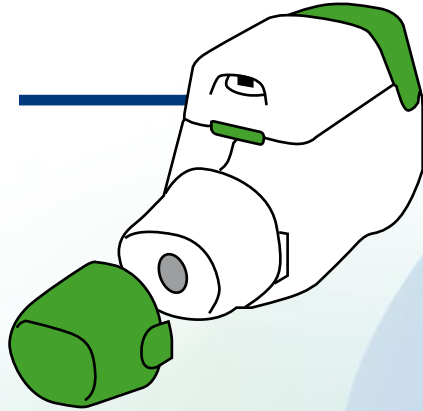
Jarraibideak

1	2	3
<p>Lehiatilak kolore gorria daukala egiazta ezazu.</p> 	<p>Botoi berdea hondoraino zanpatu eta guztiz askatu.* Leihatila berde kolorez agertuko da.</p> 	<p>Arnasa bota, birikak hustu arte.</p> 
4	5	6
<p>Ahokoa behar den eran kokatu ezpaineekin zigitatuz. Arnasa sakon hartu ahalik eta denbora luzeen. Arnastu bitartean "klik" bat entzungo duzu. EKIN IEZAZIOZU ARNASA HARTZEARI ahal duzun bitartean.</p> 	<p>Inhalagailua ahotik kendu eta arnasketari 8 segundoz eutsi. Airea poliki-poliki bota.**</p> 	<p>Ahoa garbitu inhalazioak amaitutakoan.</p> 

* Ez zanpatu berriz, ezta zanpatuta mantendu ere.

** Inhalagailu honen edo beste baten dosi gehiago behar badira, gutxienez 30 segundo itxaron hartualdi baten eta hurrengoaren artean.





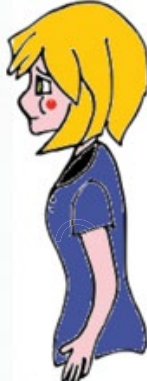

Genuair



Indicaciones de uso

- Antes de tomar el inhalador expulse todo el aire de los pulmones. No expulse aire en el interior de la boquilla.
- Una vez colocada la boquilla del dispositivo en la boca, coja aire sin parar hasta llenar el tórax completamente, retire el inhalador de la boca y aguante la respiración 10 segundos.
- En cada toma el indicador de dosis (ventana pequeña lateral) va descendiendo de 10 en 10 desde 60 a 0 con cada toma. Cuando quedan 10 dosis aparecen líneas rojas.
- Enjuáguese la boca con agua para eliminar restos de medicamento.
- Utilice un pañuelo de papel o paño seco para limpiar la boquilla.
- No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos.
- Guarde el inhalador cerrado y en lugar seco.

Instrucciones

1	2	3
<p>Comprobar que la ventanilla tiene color rojo.</p> 	<p>Pulsar el botón verde hasta el fondo y soltarlo completamente*. La ventana se pondrá de color verde.</p> 	<p>Efectuar una espiración completa.</p> 
4	5	6
<p>Colocar correctamente la boquilla y sellar los labios alrededor inhalando con fuerza durante el máximo tiempo posible. Durante la inhalación sonará un "clic", NO DEJE de inhalar hasta que no pueda seguir inspirando.</p> 	<p>Retirar el inhalador de la boca y mantener la inspiración durante 8 segundos. Expulsar el aire lentamente.**</p> 	<p>Enjuagar la boca al finalizar las inhalaciones.</p> 

* No repetir pulsación ni mantener pulsado.

** Si se precisan nuevas dosis de este u otro inhalador, esperar un mínimo de 30 segundos entre cada una de ellas.